





MODEL	PASSION		FUSION				FASHION MINI	FASHION	FASHION POWER	IIC	CIC	XP
Reproduktorek	S-reproduktor	M- reproduktor	S- reproduktor	M- reproduktor	P- reproduktor	HP-reproduktor	-	-	-	-	-	-
Otevřené nastavení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Velikost baterie	10	10	312	312	312	312	312	312	13	10	10	312
Životnost baterie	95 h	90 h	150 h	150 h	140 h	135 h	135 h	140 h	260 h	100 h	95 h	130 h
Regulace slyšitelnosti	Pomocí DEX	Pomocí DEX	Volitelné/pomocí DEX	Volitelné/pomocí DEX	Volitelné/pomocí DEX	Volitelné/pomocí DEX	Volitelné/pomocí DEX	Ano	Ano	Ne	Pomocí DEX	Pomocí DEX
Přepínání programů	Pomocí DEX	Pomocí DEX	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Pomocí DEX	Pomocí DEX
Indukční cívka	Pomocí DEX	Pomocí DEX	Ano	Ano	Ano	Ano	Pomocí DEX	Ano	Ano	Ne	Pomocí DEX	Pomocí DEX
Kompatibilita s Widex CROS	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
Zařízení DEX*	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Všechna	Ne	Všechna	Všechna
Max. zesílení	63 dB	69 dB	63 dB	68 dB	70 dB	84 dB	64 dB	71 dB	77 dB	63 dB	63 dB	68 dB
MPO	118 dB SPL	124 dB SPL	118 dB SPL	124 dB SPL	131 dB SPL	137 dB SPL	135 dB SPL	137 dB SPL	138 dB SPL	124 dB SPL	124 dB SPL	128 dB SPL
Frekvenční rozsah	100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9200 Hz	100 Hz - 6700 Hz	100 Hz - 6000 Hz	100 Hz - 8450 Hz	100 Hz - 7600 Hz	100 Hz - 6250 Hz	100 Hz - 9700 Hz	100 Hz - 9700 Hz	100 Hz - 9800 Hz
Odolnost proti prachu a vlhkosti	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58	IP-58

* COM-DEX, COM-DEX Remote Mic, CALL-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, TV-DEX, FM+DEX, PHONE-DEX (Dostupné pouze v některých zemích)

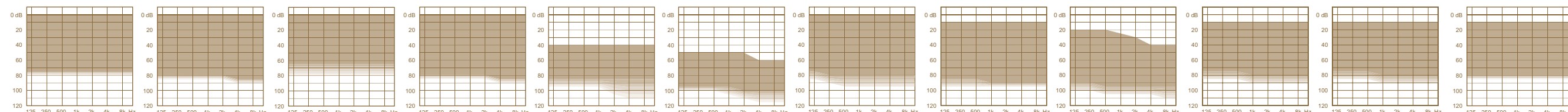

BARVY	Béžová / 021	Hedvábně hnědá / 081	Zimní stříbrná / 072	Titanově šedá / 073	Půlnocní černá / 074	Kávové hnědá / 071	Měděně hnědá / 070	Letní zlatavá / 069	Tyrkysové modrá / 078	Ostře růžová / 077	Sportovní červená / 076	Limetkově zelená / 075	Kovově modrá / 090	Perlově bílá / 068	Stříbrně bílá / 112	Světle béžová / 025	Tmavě hnědá / 107	Jilově hnědá / 028
PASSION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
FUSION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
FASHION MINI	•	•	•	•	•	•	•	•				•						
FASHION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
FASHION POWER	•	•	•	•	•	•	•	•										
ITE/CIC/IIC																•	•	•

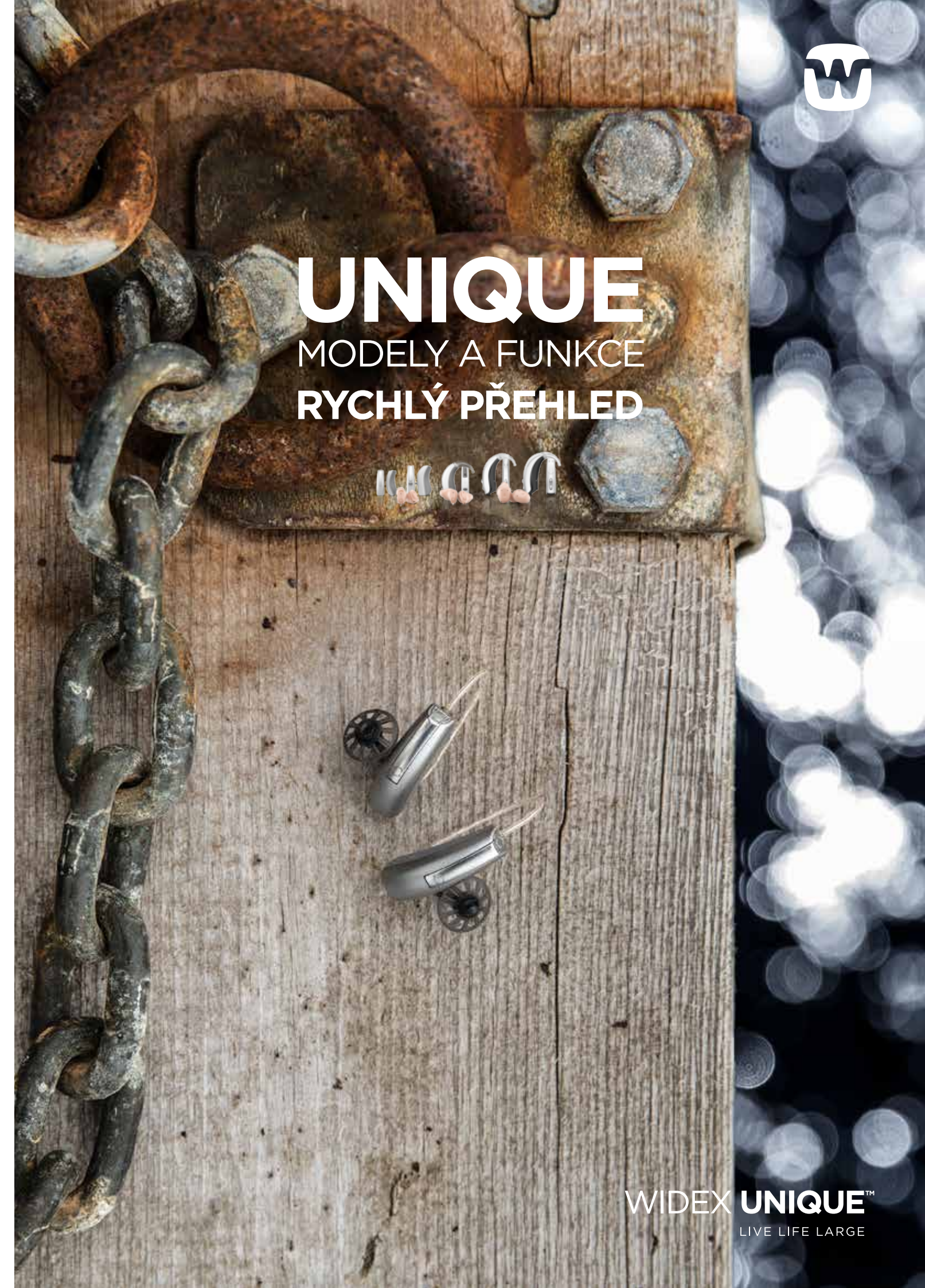

UNIQUE

MODELY A FUNKCE

RYCHLÝ PŘEHLED



WIDEX, WIDEX UNIQUE a DEX jsou ochranné známky společnosti Widex A/S.

Printed by KLS/2016-09
9 502 4155 020 #01

Widex A/S, Nymoellevvej 6
DK-3540 Lyngø



FUNKCE SLUCHADEL UNIQUE - PŘEHLED

FUNKCE	UNIQUE™440	UNIQUE™330	UNIQUE™220	UNIQUE™110
Technologická úroveň sluchadla	*****	****	***	**
Počet kanálů	15	10	6	4
Počet pásem jemného doladění	15	10	6	4
U platforma	●	●	●	●
Bezdrátová komunikace WidexLink	●	●	●	●
Zvýraznění vysokých frekvencí	●			
Regulátor slyšitelnosti	U	U	U	U
Potlačení hluku větru	U			
Volba směrového zaměření	●	●	●	Vpřed
Digitální boltec	●	●		
Potlačení tichých rušivých zvuků	●	●	●	●
TruSound Softener (potlačení impulsních zvuků)	●	●	●	
Zvýraznění řeči v reálném čase	U/IE	IE		
Potlačení hluku	●	●	●	●
Počet Zvukových tříd	9/IE	5/IE	3	1
HD Lokátor	15	10	6	Širokopásmový
Programy	5	4	3	3
Zen	IE	IE	IE	●
Rozšíření slyšitelnosti	U	U	U	U
Kompresce s proměnlivou rychlostí	U/IE	U/IE	U/IE	U
Dálkové ovladače DEX*	●	●	●	●
Aplikace pro iPhone, Apple Watch a Android	Pomocí COM-DEX	Pomocí COM-DEX	Pomocí COM-DEX	Pomocí COM-DEX

* Doplnková zařízení DEX zahrnují následující modely: CALL-DEX, UNI-DEX, COM-DEX, COM-DEX Remote Mic, TV-DEX, RC-DEX, FM+DEX a PHONE-DEX. PHONE-DEX je dostupný pouze pro Evropu, USA a Kanadu.

FUNKCE	POPIS FUNKCE
Počet kanálů	Pro přesné a podrobné nastavení sluchadla, přirozený zvuk a lepší srozumitelnost řeči.
Počet pásem jemného doladění	Umožní jemnější doladění sluchadla podle konkrétních požadavků pacienta.
U platforma	Hladký a individuálně přizpůsobený zvuk za všech podmínek – tichých, hlasitých, běžných i náročných.
Bezdrátová komunikace WidexLink	Přenos vysoce kvalitního zvuku a dat mezi dvěma sluchadly nebo mezi sluchadly a zařízením DEX v reálném čase.
Zvýraznění vysokých frekvencí	Čistě a jasně slyšitelné vysoké frekvence (např. v hudbě).
Regulátor slyšitelnosti	Uživatel si může upravit nastavení sluchadel pro lepší srozumitelnost nebo více poslechového komfortu.
Potlačení hluku větru	Řeč a ostatní zvuky budou slyšitelné i v hluku větru.
Volba směrového zaměření	Poslech se sluchadly může být pro specifické situace zaměřen na zvuky přicházející zepředu nebo zezadu.
Digitální boltec	Pomáhá přirozeně lokalizovat zvuk přicházející zepředu nebo zezadu vytvořením efektu ušního boltce.
Potlačení tichých rušivých zvuků	Nežádoucí tiché šumy jsou potlačeny pro dosažení vyššího poslechového komfortu.
TruSound Softener	Potlačuje náhlé, nenadálé zvuky jakékoli hlasitosti.
Zvýraznění řeči v reálném čase	Potlačuje hluk a zvýrazňuje řeč v reálném čase s ohledem na aktuální poslechovou situaci a individuální ztrátu sluchu.
Potlačení hluku	Zvýší poslechový komfort v hlučném prostředí a zdůrazní řeč.
Technologie Zvukových tříd	Sluchadla analyzují okolní prostředí, automaticky nastaví odpovídající Zvukovou třídu a upraví parametry pro ideální poslechový komfort a vynikající slyšitelnost.
HD Lokátor	Pro lepší srozumitelnost řeči v hlučném prostředí s adaptivním nastavením směrovosti jednotlivých kanálů pro zdůraznění řeči.
Programy	Široká nabídka poslechových programů pro specifické situace.
Zen	Nástroj pro potlačení tinnitu nebo relaxaci pomocí harmonických tónů nebo šumu.
Rozšíření slyšitelnosti	Umožní slyšet i vysokofrekvenční zvuky a složky řeči pomocí lineární frekvenční transpozice
Kompresce s proměnlivou rychlostí	Automatická změna rychlosti komprese pro přirozené změny zvuku a lepší srozumitelnost.
Doplnková zařízení DEX*	Praktické, vysoce kvalitní spojení sluchadel s telefony, televizory, audio zařízeními atd.
Aplikace pro iPhone, Apple Watch a Android	Snadné ovládání sluchadel z jakéhokoli chytrého telefonu.

BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ DEX - PŘEHLED

COM-DEX

PRO PŘENOS ZVUKU A OVLÁDÁNÍ SLUCHADEL

Skutečně hands-free zařízení pro přenos vysoce kvalitního zvuku z jakéhokoli mobilního telefonu nebo jiného Bluetooth zařízení do sluchadel. U chytrých telefonů je možné díky aplikaci COM-DEX navíc také ovládat hlasitost, přepínat programy nebo měnit směr poslechu.

- Praktické hands-free zařízení
- Kompatibilní s jakýmkoli mobilním telefonem
- Přenáší zvuk ze všech Bluetooth zařízení
- Dostupný ve třech stylových barvách
- 8 hodin přenosu
- 8 dní standby
- Pohodlná látková smyčka okolo krku
- Ovládání sluchadel díky mobilní aplikaci
- Funkce vypnutí okolních zvuků



COM-DEX REMOTE MIC

SLYŠET ROZHOVOR SE VŠEMI DETAILS

COM-DEX Remote Mic je stylovým doplňkem ke COM-DEXu, který umožní lépe rozumět jiné osobě až na vzdálenost 10 metrů.

- Pomocí COM-DEX se bezdrátově propojí se všemi bezdrátovými sluchadly Widex
- Praktický kovový klip pro snadné uchycení
- Tlačítko pro zahájení/ukončení přenosu zvuku přímo na COM-DEX Remote Mic
- Mikrofon lze ovládat také pomocí aplikace COM-DEX
- Výdrž až 8 hodin nepřetržitého provozu



CALL-DEX

PRO DISKRÉTNÍ PŘENOS ZVUKU Z MOBILNÍHO TELEFONU

- Připojí se ke všem mobilním telefonům se sluchátkovým výstupem (3.5 mm jack)
- Přenos probíhá automaticky
- Žádná tlačítka
- Výdrž až 80 hodin přenosu
- Standby až 3 týdny
- Velmi malý a praktický



UNI-DEX

PRO SNADNĚJŠÍ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

- Připojí se ke všem zařízením se sluchátkovým výstupem (3.5 mm jack)
- Přenos probíhá automaticky
- Vestavěný mikrofon pro hands-free telefonování
- Výdrž až 40 hodin přenosu
- Nabíjení baterie do 1 hodiny
- Funkce vypnutí okolních zvuků



RC-DEX

VÁŠ DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Přepínač programů
- Regulace slyšitelnosti
- Očko pro přichycení na klíčenku
- Výdrž baterie více než 12 měsíců
- Zámek tlačítek



TV-DEX

PRO SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

- Zvuk v hi-fi kvalitě
- Extrémně malé zpoždění "EchoFree™"
- Propojení s TV i audio systémy
- Funkce vypnutí okolních zvuků
- 10 hodin nepřetržitého přenosu
- Dobíjení v základně



FM+DEX

BEZDRÁTOVÝ FM-SYSTÉM

- Flexibilní zařízení pro přenos FM signálu
- Malý a snadno ovladatelný
- Dosah až 30 m
- Výdrž baterie 10 hodin
- Funkce vypnutí okolních zvuků



PHONE-DEX

PRO PEVNOU TELEFONNÍ LINKU

- Dosah od základny až 300 metrů
- Telefonní seznam pro 20 čísel
- 100 hodin standby a 10 hodin volání
- Dobíjení v základně
- Funguje také jako běžný telefon – pro ostatní členy domácnosti nebo kolegy

