



DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID

WIDEX MOMENT SHEER™

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID

We weten dat de eerste ervaring met een hoortoestel sterk bepalend is voor de richting van de reis naar beter horen. Door een negatieve ervaring kan een gebruiker zich gaan afvragen of het überhaupt wel een goed idee was om een hoortoestel te proberen. Een goede ervaring kan ze echter een sterker gevoel van verbondenheid met hun leven geven dan ze in jaren hebben ervaren.

Wij geloven dat het mogelijk is om gebruikers een geluid te bieden dat zo natuurlijk klinkt dat ze vanaf het eerste moment versteld staan. Hoe? Met Widex PureSound™.

Waarom klinkt PureSound zo natuurlijk?

Onze gebruikers zeggen dat één van de redenen waarom PureSound zo natuurlijk klinkt is dat de ruimte om hen heen voelt zoals het hoort, met een rijk en open geluid. Deze ervaring komt ook naar voren in de enquêtegegevens: 95% van de dragers geeft aan dat ze met PureSound het gevoel hebben dat elk geluid precies op de plek zit waar ze het verwachten.


Hoe werkt PureSound?

Widex Moment Sheer heeft twee geluidspaden die voor een ongeëvenaarde helderheid van het geluid zorgen.

PureSound voor licht tot matig gehoorverlies...

Maakt een einde aan het slechte, kunstmatige geluid dat zo gebruikelijk is bij open en gevante aanpassingen dankzij een tweede bewerkingskanaal: het **ZeroDelay™** technologie geluidsmechanisme. **ZeroDelay** biedt de snelste geluidsverwerking die mogelijk is in digitale hoortoestellen. Dit maakt een einde aan door vertraging veroorzaakte vervorming en resulteert voor de gebruiker in het ongelooflijk natuurlijke geluid dat wij PureSound noemen.

Het **PureSound**-geluidspad maakt ook gebruik van TruAcoustics™, **ons optimale in situ akoestische evaluatie algoritme.**

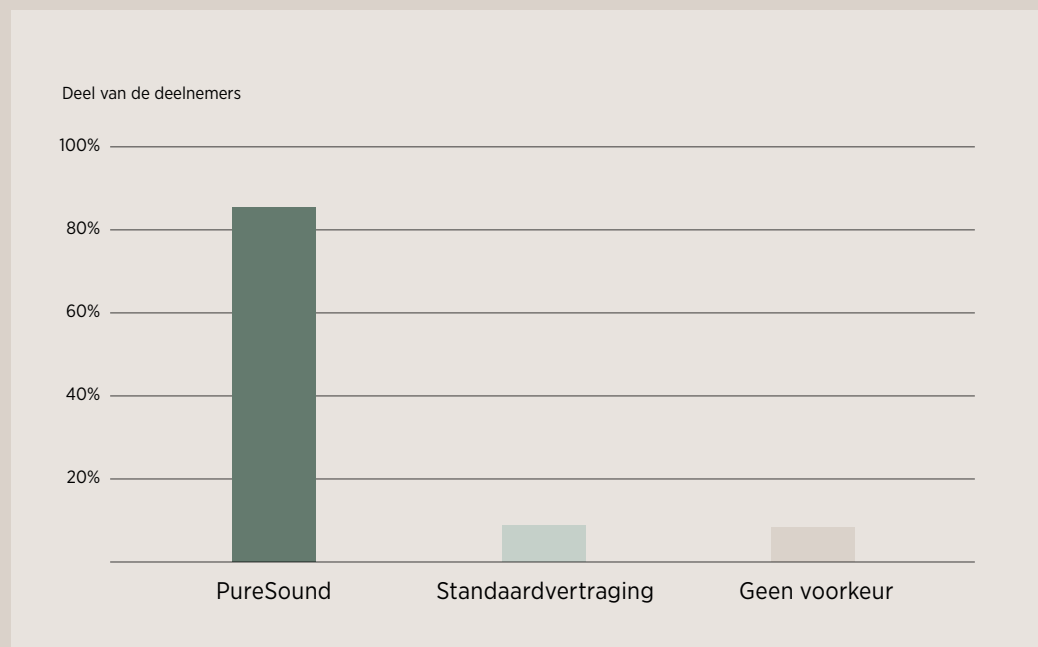

* Beschikbare gegevens.



PRESTATIES & FUNCTIES

	Widex Moment 440	Widex Moment 330	Widex Moment 220	Widex Moment 110
HOORBAARHEID/LUISTEREN IN EEN STILLE OMGEVING				
Widex PureSound met ZeroDelay-technologie	●	●	●	●
TruAcoustics™ met Personal Gain Integrator	●	●	●	●
Variable Speed Compression	● (IE)	● (IE)	●	●
Digital Pinna	●	●	—	—
Enhanced Dynamic Range Compression	●	●	●	●
Rekenregels	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL
LUISTEREN IN RUMOERIGE OMGEVINGEN				
True-Input-technologie	●	●	●	●
High Definition Locator	15 kanalen	12 kanalen	10 kanalen	6 kanalen
Speech Enhancer	● (RT/IE)	● (IE)	—	—
Lawaaionderdrukking	●	●	●	●
Soft Level Noise Reduction	●	●	●	●
Richting	Via Moment App	Via Moment App	Via Moment App	Via Moment App
Reverse focus-programma	Via Moment App	Via Moment App	Via Moment App	—
GEBRUIKSGEMAK				
Voorkeursregeling	●	●	●	●
Fluid Sound Analyser (geluidsklassen)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Multi-directional Active Feedback Cancelling	IE	IE	IE	●
TruSound Softener	●	●	●	—
TruSound AOC	●	●	●	●
Hammer Detector	●	●	●	●
Smartwind Manager™/Windruis demping	●	—	—	—



	Widex Moment 440	Widex Moment 330	Widex Moment 220	Widex Moment 110
GEBRUIKERSBEDIENING				
SoundSense Adapt	●	●	●	—
Luisterprogramma's	5	4	3	3
Volume/programma wisselen met InterEar	●	●	●	●
Streamingsjabloon Spraak (S) / Muziek (M)	S/M	S/M	S/M	S/M
Phone+	●	●	—	—
SmartSpeak/SmartTone	●	●	●	●
Personal Zen	●	●	●	●
Zen/Zen+	IE	IE	IE	IE
Draadloos CROS-compatibel	●	●	●	●
HOREN VAN HOGE FREQUENTIES				
High frequency boost	●	—	—	—
Audibility Extender	●	●	●	●
AANPASSEN EN FIJNREGELING				
Verwerkingskanalen	15	12	10	6
Fijnregelkanalen	15	12	10	6
High-resolution Sensogram (9 aanpasbanden)	●	●	●	●
Sound Diary/Datalogging	●	●	●	●
APPS, ACCESSOIRES EN AFSTANDSBEDIENINGEN				
Widex Moment App met MySound*	●	●	●	—
Widex Tonelink App	●	●	●	●
COM-DEX App	●	●	●	●
TV PLAY	●	●	●	●
COM-DEX	●	●	●	●
RC-DEX	●	●	●	●
TV-DEX	●	●	●	●
FM+DEX	●	●	●	●

* alleen sRIC R D, mRIC R D, RIC 312 D, BTE R D en BTE 13 D, geen SoundSense Learn bij 110







DE WIDEX MOMENT-SERIE

WIDEX MOMENT SHEER







MODEL	sRIC R D		mRIC R D		RIC 10	
STIJLTYPE	RIC		RIC		RIC	
LUIDSPREKER	V.2 M-telefoontje	V.2 P-telefoontje	V.2 M-telefoontje	V.2 P-telefoontje	S-telefoontje	M-telefoontje
Open-fit-optie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type batterij	-	-	-	-	10	10
Gebruiksduur batterij	16-20 uur	16-20 uur	16-20 uur	16-20 uur	100 uur	100 uur
Bescherming tegen stof en water	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Oplaadbare oplossing	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	-	-
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN						
Volumeregeling	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via DEX of app	via DEX of app
Voorkeursregelaar	Ja	Ja	Ja	Ja	via DEX of app	via DEX of app
Programma wisselen	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via DEX of app	via DEX of app
Luisterspoel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
ACCESSOIRES						
Compatibel met DEX-accessoire*	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Afstandsbediening (optioneel)*	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of app	via DEX en/of app
TV PLAY	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
CROS	-	-	-	-	Ja	Ja
DAI-compatibel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
TECHNISCHE GEGEVENS						
Max. versterking/MPO (dB/dB SPL)	69 - 128	71 - 133	69 - 128	71 - 133	63 - 118	69 - 124
Bandbreedte (Hz)	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 8050	100 - 10000	100 - 10000
Aanpasbereik (dB)	0 - 90	20 - 110	0 - 90	20 - 110	0 - 80	0 - 90

* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX, COM-DEX

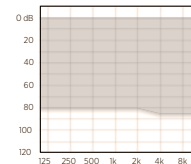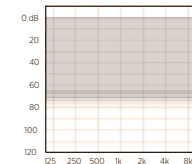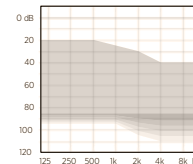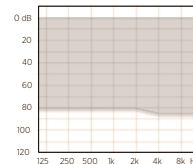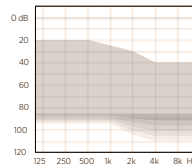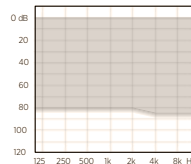

**RIC 312 D****RIC/RITE**

S-telefoonhoorn	M-telefoonhoorn	P-telefoonhoorn	HP-telefoonhoorn
Ja	Ja	-	-
312	312	312	312
165 uur	165 uur	160 uur	155 uur
IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
-	-	-	-
via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App	via knop, DEX of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
Alle	Alle	Alle	Alle
via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App	via DEX en/of Moment App
Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	-	-
via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX
62 - 118	69 - 124	70 - 132	84 - 138
100 - 10000	100 - 10000	100 - 6750	100 - 7300
0 - 80	0 - 90	20 - 110	50 - 115

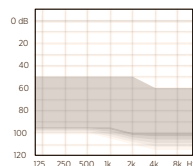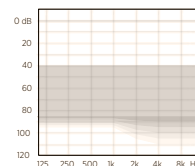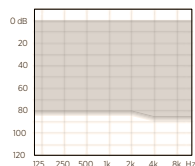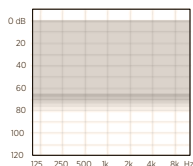**BTE R D****BTE 13 D****BTE 312****MODEL****STIJLTYPE****LUIDSPREKER**

Optie open aanpassing (BTE/RIC)

Type slangetje

Type batterij

Gebruiksduur batterij

Bescherming tegen stof en water

Oplaadbare oplossing

BEDIENINGSMOGLIJKHEDENVolumeregeling⁵Voorkeursregelaar⁵Programma wisselen⁵

Luisterspoel

ACCESSOIRESCompatibel met DEX-accessoire¹Afstandsbediening⁵ (optioneel)

TV PLAY

CROS²

DAI-compatibel

TECHNISCHE GEGEVENSMax. versterking/MPO (dB/dB SPL)³Bandbreedte⁴ (Hz)

Aanpasbereik (dB)

BTE

Ja

V.2 Dun/Klassiek

-

24-30 uur

IP-68

Li-ion

via knop, DEX of App

Ja - met LED

via knop, DEX of MOMENT APP

Ja

Alle

via DEX en/of MOMENT App

Ja


-

via FM+DEX

66-139*

10-7900*

0-105

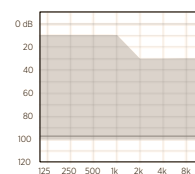**BTE**

Ja

V.2 Dun/Klassiek

13

235 uur

IP-68

-

via knop, DEX of App

Ja

via knop, DEX of Moment APP

Ja

Alle

via DEX en/of Moment App

Ja


-

via FM+DEX

64-135

100-8450

0-105

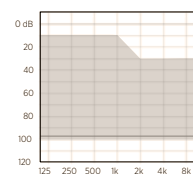**MICRO BTE**

Ja

Dun/Klassiek

312

155 uur

IP-68

-

via knop, DEX of App

Ja

via knop, DEX of APP

via FM+DEX

Alle

via DEX en/of APP

-


Ja

via FM+DEX






64-135

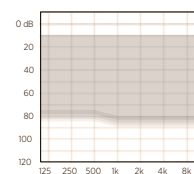100-8450






0-95



¹ COM-DEX, RC-DEX, TV-DEX, FM+DEX, ² Is een CROS-FS en CROS-FA. ³ IEC 60118-0 Piekwaarden, ⁴ Overeenkomstig 60118.0:1983, ⁵ App = Tonelink App, * Data kan zonder nadere berichtgeving gewijzigd worden

					
MODEL	XP	IM	IP	CIC	CIC-M
STIJLTYPE	ITE/ITC	ITE/ITC	ITE/ITC	CIC	CIC MICRO
LUIDSPREKER					
Open-fit-optie	-	-	-	-	-
Type batterij	312	312	312	10	10
Gebruiksduur batterij	150 uur	160 uur	135 uur	105 uur	110 uur
Bescherming tegen stof en water	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68	IP-68
Opladbare oplossing	-	-	-	-	-
BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN					
Volumeregeling	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Voorkeursregelaar	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Programma wisselen	via DEX of app	via DEX, knop of app	via DEX, knop of app	via DEX of app	via App
Luisterspoel	Ja	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	
ACCESSOIRES					
Compatibel met DEX-accessoire*	Alle	Alle	Alle	Alle	-
Afstandsbediening (optioneel)	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via DEX en/of app	via App
TV PLAY	-	-	-	-	-
CROS	Ja	Ja	Ja	Ja	-
DAI-compatibel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	-
TECHNISCHE GEGEVENS					
Max. versterking/MPO (dB/dB SPL)	67 - 128	63 - 123	68 - 127	63 - 124	63-124
Bandbreedte (Hz)	100 - 9800	100 - 10000	100 - 10000	100 - 9700	100-10.000
Aanpasbereik (dB)	0 - 85	Tot 90	Tot 90	Tot 90	tot 90

* TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX,

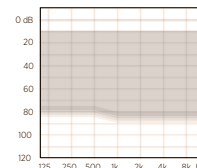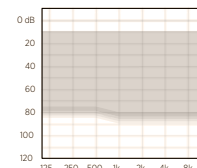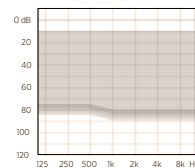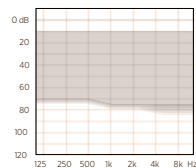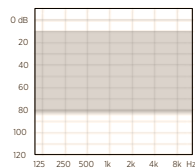


KLEUREN

sRIC 13 kleuren



ITE-modellen (in-het-oor) - 3 kleuren

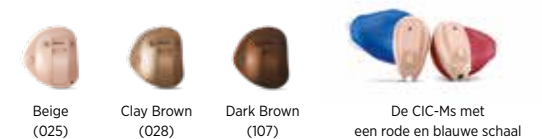

OPLADERS



PRESTATIENIVEAU/ VOORDEEL	SOCIAAL	MUZIEK		RUSTIG		PARTY		VERVOER		STAD	
		-	Klassiek of modern	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											

WAAROM WIDEX **MOMENT** DE JUISTE KEUZE IS VOOR UW KLANTEN

Voor de beste hoorbeleving is Widex Moment voorzien van exclusieve Sound Class-technologie die het hoortoestel automatisch aanpast aan de specifieke luisterbehoeften van uw klant. Widex Moment biedt in elke situatie optimale helderheid, ongekend comfort en de beste hoorbaarheid zonder dat u knopjes hoeft in te drukken.


PRESTATIENIVEAU/ VOORDEEL	Spraak beter verstaan Hoor geaccentueerde spraak en minder ruis uit de omgeving	Minder windruis Hoor duidelijk, ook als het waait	Natuurlijke geluidsbeleving Kies tussen de bekende Widex Sound of de nieuwe Widex PureSound	Automatische geluids-aanpassing Het hoortoestel hoeft niet in elke situatie te worden afgesteld	Rechtstreeks streamen via Bluetooth® Stream geluid rechtstreeks vanaf Apple- of Android-apparaten	Makkelijk te bedienen Een intuïtieve app en kunstmatige intelligentie resulteren in het beste geluid	Widex Remote Care™ Maakt aanpassing en verfijning op elke door de klant gewenste locatie mogelijk	Praktijk-inzichten Faciliteert inzicht door toegang te bieden tot de persoonlijke programma's van klanten
Widex Moment 440	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 330	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 220	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	JA	JA	JA	JA
Widex Moment 110	● ●	● ● ●	● ●	● ●	JA*	JA*	JA	JA

* zonder MySound™

DE WIDEX MOMENT APPS

De intuïtieve en eenvoudige Moment smartphone-app voor zowel iOS als Android geeft gebruikers de controle over een breed scala aan functies en instellingen voor hun hoortoestel. Naast de vele andere functies geeft de app toegang tot de krachtige geluidspersonalisatie van MySound, direct streamen voor muziek, video en telefoongesprekken, en tips en advies over het gebruik van Moment met My Guide.

Voor Moment-hoortoestellen zonder Bluetooth-connectiviteit kan de Widex ToneLink™-app worden gebruikt voor het regelen van de instellingen van het hoortoestel. Zie voor meer informatie de ToneLink-brochure of de website.

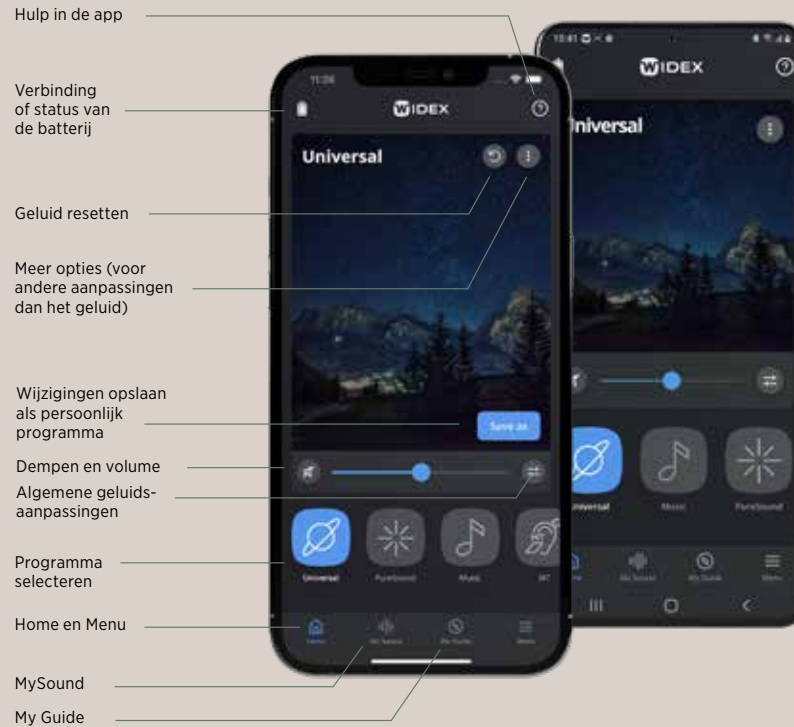

WIDEX MOMENT App



WIDEX TONELINK App

My Guide - Zo haalt u het meeste uit Moment

Maak kennis met My Guide. Dit gedeelte van de Moment App adviseert gebruikers door middel van stapsgewijze instructies en video's voor elk onderwerp, van het aanzetten van hun hoortoestel tot het personaliseren van het geluid met MySound. Ook is er een serie korte cursussen beschikbaar om gebruikers te helpen wennen aan het dagelijks leven met hun hoortoestel.

MySound - een helpende hand voor een meer persoonlijk geluid

MySound combineert persoonlijke ervaringen met de enorme kracht van kunstmatige intelligentie, en brengt ze samen in een simpele, eenvoudige app waarmee gebruikers op twee manieren een beter geluid kunnen krijgen: "Speciaal voor u" en "Maak uw eigen" geluid.



* De Widex Moment-app werkt met de volgende Widex Moment-modellen: sRIC R D (MRR4D), mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D) BTE R D en BTE 13 D (MBB3D).

COMPLETE CONNECTIVITEIT

Met Widex Moment blijft connectiviteit niet beperkt tot onze apps. Ons assortiment DEX-accessoires houdt gebruikers verbonden met een wereld aan geluid.

RC-DEX

- Programmaschakelaar
- Volume harder/zachter
- Bevestiging aan sleutelring
- Gemiddelde gebruiksduur batterij 12 maanden
- Toetsvergrendeling



DE NIEUWE, STIJLVOLLE WIDEX TV PLAY VOOR VLOT STREAMEN

Alle Widex Moment hoortoestellen met directe connectiviteit werken perfect samen met **TV Play**.

- Optimale stabiliteit bij streamen
- Een nieuwe, stijlvolle uitstraling met exclusief Kvadrat-materiaal en metalen rand
- Intuïtief installeren en naadloos koppelen



TV-DEX

- Audio van hoge kwaliteit
- Onhoorbare vertraging Echo-Free™
- Ingangen voor tv- en hifi-systemen
- Functie Room Off
- 10 uur non-stop capaciteit
- Op te laden via het tv-basisstation



FM+DEX

- Een flexibel apparaat voor FM-streaming, line-in en luisterspoel
- Klein en eenvoudig in gebruik
- Antennebereik tot 30 meter
- Batterijcapaciteit van 10 uur



PHONE-DEX 2

- DECT-telefoon
- Plug & play
- Bereik to basis tot 50 meter
- Telefoonboek voor max. 150 contacten
- 320 uur stand-by en 14 uur gesprekstijd zonder opladen



COM-DEX

- Volledig handsfree communicatie
- Compatibel met de meeste mobiele telefoons
- Streamt audio vanaf de meeste Bluetooth® apparaten
- Verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren
- 8 uur streamingtijd
- 8 dagen stand-by/bedieningstijd*
- Nekkoord van comfortabele stof
- Bediening van uw hoortoestellen via de COM-DEX-app



*12 uur per dag



SOUND LIKE NO OTHER



Widex is een geregistreerd handelsmerk van WIDEX A/S.
Drukwerk door Rosendahls a/s. 2022-08, 9 502 5333 001 #04

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Wijzigingen voorbehouden zonder nadere kennisgeving.

WWW.WIDEX.PRO

